

# Invacare® | **SB® 755 Wide**

NIEUW



Tot 235 kg

## Een maatje meer... *Invacare SB 755 Wide*

Het populaire **SB 755** van Invacare is nu ook verkrijgbaar in bredere varianten van 1050 mm en 1200 mm, om zo meer comfort te bieden aan eindgebruikers. Deze bredere modellen bieden extra ruimte en comfort ook voor langere cliënten en voldoende ruimte om te draaien.

Het **SB 755 Wide** is ontworpen met een verbeterd virtueel draaipunt om optimaal comfort te bieden. Het bed biedt ook een optimale zitpositie en is ontworpen om schuif- en wrijfkrachten te reduceren. Het **SB 755 Wide** is aantrekkelijk en modern; het gestroomlijnde design is eenvoudig schoon te maken en staat goed in elke thuiszorg- of instellingsomgeving.

Het **SB 755** voldoet aan de nieuwe IEC beddenorm 60601-2-52.



**Yes, you can.®**



**Eigenschappen en opties**

**Comfort voor gebruikers en verzorgenden**

Het **SB 755 Wide** is uitgerust met verschillende eigenschappen die een optimale zitpositie en minimale schuif- en wrijfkraften tijdens bewegingen garanderen. Omdat Invacare ernaar streeft tegemoet te komen aan alle behoeften in de markt is er nu ook een bedverlenging van 100 mm bij het hoofd- en/of voeteind verkrijgbaar.


**Gebruiksgemak!**

Het monteren en demonteren van het bed is uitzonderlijk eenvoudig om eenvoudig transport en opslag mogelijk te maken.

Het bed kan op een trolley worden gezet en direct van en naar de slaapkamer worden gereden. Let erop dat alle zijhekken van de **SB 755** serie aan de nieuwe IEC veiligheidsnorm voor beddekken voldoen.



**Verbeterd virtueel draaipunt**  
Meer comfort bij veranderen van de zitpositie, lagere schuif- en wrijfkraften.

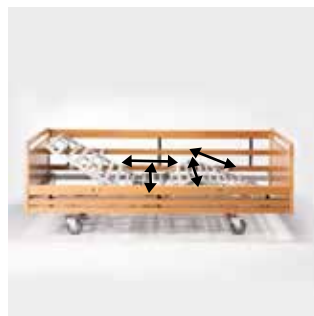

Geoptimaliseerde matrasbodemverdeling op basis van ergonomisch onderzoek, voor meer comfort.



**Bedverlenging**

Uitschuifbare matrasbodem. 100 mm extra bij hoofd- en voeteinde. Bed is eenvoudig 50, 100, 150 of 200 mm te verlengen.

**Technische gegevens**

<b>SB 755 Wide 1050 mm</b>	Breedte buitenmaat*: 1150 mm Breedte binnenmaat: 1050 mm	Lengte buitenmaat*: 2130 mm Lengte binnenmaat: 2080 mm Matraslengte: 2000 mm	Instelbare hoogte: 350 - 820 mm Totale hoogte: 1600 - 2070 mm	Matrasbodemverdeling: 800 - 260 - 260 - 680 mm	Bodemvrijheid: 170 mm	0° - 73° Rughoek	0° - 28° Kniehoek
<b>SB 755 Wide 1200 mm</b>	Breedte buitenmaat*: 1300 mm Breedte binnenmaat: 1200 mm	Lengte buitenmaat*: 2130 mm Lengte binnenmaat: 2080 mm Matraslengte: 2000 mm	Instelbare hoogte: 350 - 820 mm Totale hoogte: 1600 - 2070 mm	Matrasbodemverdeling: 800 - 260 - 260 - 680 mm	Bodemvrijheid: 170 mm	0° - 73° Rughoek	0° - 28° Kniehoek

<b>SB 755 Wide</b>	0° - 16° Minimale beenhoek onder frame	0° - 18° Beenhoekverstelling	25° (Hoek onder frame) 14° (Hoek boven frame)
			Max. belastbaar gewicht 235 kg Max. gebruikersgewicht 200 kg



Invacare B.V.  
Celsiusstraat 46 · 6716 BZ Ede  
Nederland  
Tel.: +31 (0) 318 - 695757  
Fax +31 (0) 318 - 695758  
Email: nederland@invacare.com  
www.invacare.nl

© 2014 Invacare International Sàrl  
Alle rechten voorbehouden.

**NB/** Dit bed is niet geschikt voor gebruik door patiënten jonger dan 12 jaar, of door patiënten met een lichaamslengte korter dan een gemiddelde 12-jarige.

**Framekleur en houtwerk**



Aluminium grijs



Beuken



**Yes, you can.®**