



Invacare®

XLT

Ervaar Uitstekende
Ondersteuning - Blijf Actief!



De *Invacare XLT* is de ideale actieve, vast frame rolstoel voor dagelijks gebruik. Dankzij het ontwerp van de stoel is deze perfect aanpasbaar aan het lichaam van de gebruiker. Daarbij beschikt de stoel over een grote reeks aan ondersteunende opties waardoor het de gebruiker een grote mate van onafhankelijkheid en mobiliteit biedt.

Eenvoudig combineren

Het ontwerp van de *Invacare XLT* is gericht op het individu. Gemeten, gebouwd en aangepast naar de behoefte van de gebruiker, is de **XLT** de ideale stoel om uw onafhankelijkheid terug te krijgen en uw mobiliteit te behouden of zelfs te verbeteren.

Individuele maatoplossingen en complexe aanpassingen worden sterk gereduceerd met de **XLT**. Door gebruik te maken van het uitgebreide aanbod van bestaande onderdelen van Invacare zijn we erin geslaagd deze eenvoudig weg te combineren met deze rolstoel.

Stabiliteit en veiligheid voor een actief leven!

De **XLT** is volledig van titanium gemaakt waardoor het gewicht van de rolstoel aanzienlijk wordt beperkt. De **XLT** heeft de crashtest volgens de ISO 7176-19 norm met glans doorstaan en kan dus als veilig vervoerbaar worden beschouwd. Met een ruime keuze uit ondersteunende opties, eigenschappen en configuratiemogelijkheden maken de **XLT** een stabiele en veilige partner in het dagelijks leven.



Bewezen kwaliteit

De rolstoel is ontworpen en wordt gebouwd in de Rea fabriek in Zweden. Door onze kennis en know-how te combineren met de sterke kwaliteitstraditie van Invacare en Rea zijn we in staat deze unieke rolstoel te bouwen: de *Invacare XLT*.



Eigenschappen en opties



Armsteunen

Diverse typen armsteunen bieden een goede en juiste ondersteuning.




Anti-tip

De anti-tip kan gemakkelijk met de voet worden weggedraaid. Daarbij is de anti-tip ook naar buiten gericht om meer ruimte te geven aan de begeleider.



Sportwielen

Fraai lichtgewicht wielen met de optionele zwarte Marathon Evolution banden.

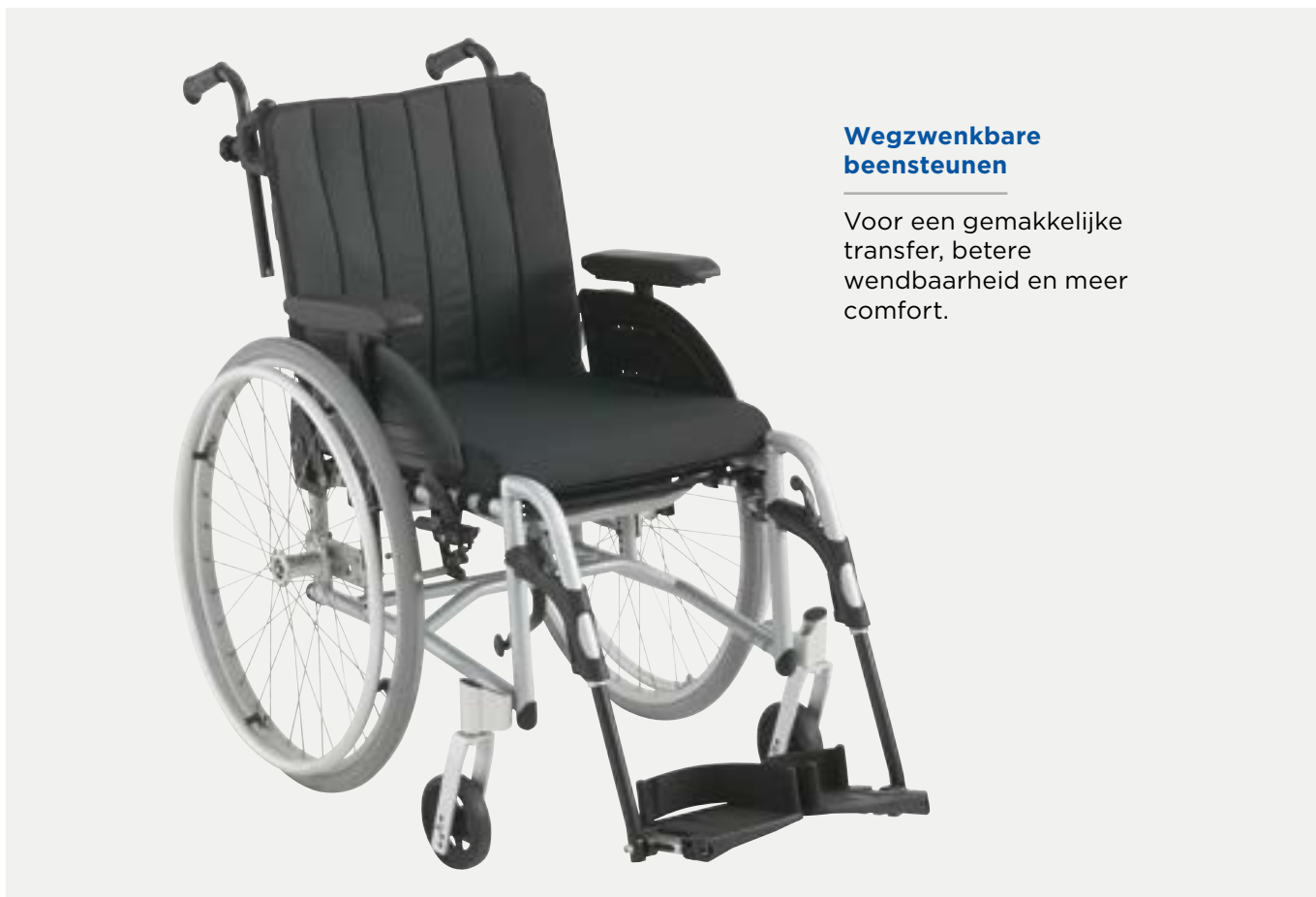

Wegzwenkbare beensteunen

Voor een gemakkelijke transfer, betere wendbaarheid en meer comfort.



Voorwielbevestiging

Voor meer stabiliteit en optimale prestaties.



Titanium voetbeugel

Verhoogt de stabiliteit van de rolstoel en bespaart gewicht.



Banden

① massief, ② lucht, ③ lucht, beperkt profiel, ④ laag profiel, ⑤ profiel.



Voorwielen

① 75 x 24 massief (3"),
② 100 x 27 massief (4")
③ 125 x 27 massief (5"),

④ 140 x 37 foam (5,5")
⑤ 150 x 27 massief (6"),
⑥ 150 x 30 foam (6"),

⑦ 150 x 32 lucht (6"),
⑧ 180 x 40 lucht (7"),
⑨ 180 x 40 foam (7")

Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze **Invacare-website**.

| | Zitbreedte | Zitdiepte | Zithoogte | Rughoogte | Onderbeenlengte | Zithoek | Rughoek |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|---------|---------|
| <i>Invacare</i> XLT Active | 355 - 480 mm | 400 / 450 / 500 | 400 - 520 mm | 200 - 490 mm | 380 - 505 mm | 0 - 14° | ± 10° |
| <i>Invacare</i> XLT Swing | 330 - 505 mm | 400 / 450 / 500 | 390 - 520 mm | 200 - 490 mm | 280 - 510 mm | 0 - 14° | ± 10° |
| | in increments of 15 mm | on 40 mm adj. | | | | | |

| | Totale breedte | Totale hoogte | Totale lengte incl. voetsteunen | Totale gewicht | Max. gebruikersgewicht | Gewicht van zwaarste onderdeel | Gecrashtest |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|-------------|
| <i>Invacare</i> XLT Active | SW + 200 mm | 610 - 1050 mm | 830 - 1030 mm | 9.8 kg | 135 kg | 6 kg | ISO 7176-19 |
| <i>Invacare</i> XLT Swing | SW + 200 mm | 610 - 1050 mm | 820 - 1230 mm | 11.3 kg | 135 kg | 6 kg | |

Framekleuren



De kleuren kunnen in het echt iets afwijken van de afbeeldingen hierboven.

* Beschikbaar als speciale bestelling

Bekleding

Black Nylon

Black Jemima



Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
 Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
 nederland@invacare.com
 www.invacare.nl

Invacare B.V.
 Galvanistraat 14-3
 6716 AE Ede
 Nederland

