

rea[®]

Azalea[®] Max



Een maatwerk oplossing voor
gebruikers met een hoger gewicht

INVACARE[®]
Yes, you can.[®]

Voor gebruikers met een hoger gewicht biedt Invacare ook een comfortrolstoel met kantelverstelling. De Rea Azalea Max is ontworpen om tegemoet te komen aan mensen met een functiebeperking en een hoger gewicht.

Verregaande uitwisselbaarheid

De **Rea Azalea Max** beschikt over kantelverstelling met gewichtsverplaatsing en het DSS (Dual Stability System) mechanisme.

De stabiliteit van deze rolstoel wordt gewaarborgd door lichaamslengte compensatie in de rug en in de beensteunen; dit is vooral van belang voor mensen die zich niet of nauwelijks kunnen bewegen en moeite hebben met het veranderen van positie.

Ergonomische duwhandvatten

De ergonomisch vormgegeven duwhandvatten staan dicht bij elkaar om het manoeuvreren te vereenvoudigen.

De alternatieve versie met hooggeplaatste handvatten biedt een andere plek voor de handen en is verkrijgbaar als optie.



◀ Tweedelige rug

De onder- en bovenkant van de voorgevormde rug zijn om te draaien, zodat gebruikers de keuze hebben tussen meer ruimte rond de borst of op de zitting.



◀ Om te bouwen voetplaat

De voetplaat bestaat uit 3 delen en beschikt over een verwijderbaar middendeel om transfers te vergemakkelijken.



◀ Elektrische zit- en rugkanteling

De gebruiker of verzorger kan de zitpositie eenvoudig aanpassen met de handbediening.

Technische gegevens ▼

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op onze Invacare-website.

	Zitbreedte ▼	Zitdiepte ▼	Zithoogte ▼	Rughoogte ▼	Hoogte armsteun ▼	Onder-beenlengte ▼	Zithoek ▼	Rughoek ▼
Azalea Max	550; 610 + 50 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 627 mm	1° - 20°	0°-30°
Azalea Max Assist	550; 610 + 100 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 627 mm	1° - 20°	0°-30°

	Totale breedte ▼	Totale hoogte ▼	Totale lengte incl. voetsteunen ▼	Totaal gewicht ▼	Max. gebruikersgewicht ▼	Transportgewicht ▼	Max. helling voor gebruik parkeerrem ▼
Azalea Max	ZB + 250 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1135 mm	54 kg	max. 180 kg	33 kg ¹	7°
Azalea Max Assist	ZB + 220 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1135 mm	54 kg	max. 180 kg	37 kg ¹	7°


1. Transportgewicht wordt met 4,2 kg verhoogd wanneer elektrische zit- en rugkanteling worden gekozen.



Frame kleur ▼



Bekleding ▼

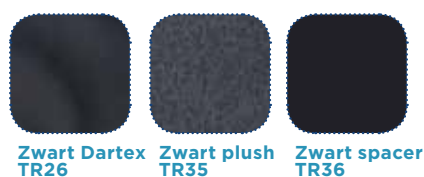

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland

Rea, Rea Design en DSS (Dual Stability System) design zijn geregistreerde handelsmerken van Invacare International. De Rea Azalea Max is ontworpen met DSS (Dual Stability System). Dit biedt de cliënt optimale stabiliteit en veiligheid wanneer de zitting gekanteld is of de rughoek is veresteld.

