

Invacare® | **Spin^x**



GESCHIKT VOOR
HULPAANDRIJVING



Zit u comfortabel?

De *Invacare Spin^x* is ontworpen voor de gebruiker met een actief sociaal leven die lichaamsondersteuning en mobiliteit nodig heeft. Het frameontwerp met ergozit biedt de gebruiker een uitstekende ergonomische zitpositie en stimuleert het actief rechtop zitten. De *Adapt Spin^x* is met zijn unieke dubbele vouwsysteem en zijn lichte gewicht ideaal voor opslag en transport.



Yes, you can.®



Individueel instelbaar - goed zitten

De Invacare **Adapt Spin^x** is voorzien van alle standaard instelmogelijkheden zodat u als gebruiker verzekerd bent van een comfortabele zitpositie. De achterzijde van de zitting is speciaal gevormd zodat er extra ruimte gecreëerd wordt voor de zitbeenderen. Dit leidt tot een ideale basis voor een stabiele en comfortabele (actieve) zitpositie.

Lichtgewicht en makkelijk te vervoeren

Het lage gewicht van de **Adapt Spin^x** maakt het mogelijk dat de rolstoel gemakkelijk is om te tillen. De **Adapt Spin^x** weegt in zijn lichtste configuratie minder dan 13 kg en slechts 7,5 kg als de verwijderbare onderdelen afgenomen worden (beensteunen e.d.).

Het dubbele vouwsysteem maakt hem een compact pakket dat in iedere auto past. Naast het vouwen van de stoel kunt u namelijk ook de rugleuning in zijn geheel neerklappen en over de reeds gevouwen zittingbuizen schuiven. Zo is de **Adapt Spin^x** ideaal voor opslag en vervoer.

Veel bewezen onderdelen

Een aanzienlijke hoeveelheid van de onderdelen zoals de armsteunen en beensteunen, die gebruikt worden op de **Adapt Spin^x** worden reeds op andere

rolstoelen binnen het assortiment van Invacare gebruikt.

Deze onderdelen hebben reeds bewezen dat ze kwalitatief en duurzaam zijn.

Eigenschappen en opties



Unieke ergozit

De achterzijde van de zitting heeft een ergozit van 5°, die daarmee extra ruimte biedt aan de zitbeenderen, voor een ontspannen zithouding en meer energie door de dag.



Instelbare zitdiepte

De zitdiepte is instelbaar voor individuele aanpassing.



Vouwmechanisme geïntegreerd

Het enkele kruisframe is geïntegreerd in het frame, de twee grootste zitbreedtes hebben een dubbel kruisframe. Dit biedt goede rijeigenschappen en een stabiel frame.



Rugleuning accessoires

Externe en in hoogte verstelbare duwhandvatten.

Eigenschappen en opties



Naspanbare ergozit

Biedt optimale lichaamshouding en balans voor voortbewegen.



Eéndelige voetplaat

De ééndelige voetplaat vergroot stabiliteit en vergroot ook het oppervlak voor de voeten.



Beensteunen

① Hoekverstelbaar, ② vast in 80° en ③ 90°. Verkrijgbaar in de gekozen framekleur of in standaard zwart.



Frame bescherming

Met de frame bescherming worden krassen voorkomen wanneer de rolstoel vervoerd wordt.



Achterwielophanging

Deze biedt verschillende balans en zithoogte mogelijkheden. Door hem te draaien kan een camber van 0° en 3° worden verkregen.



Rughoogte

De rug is hoogte instelbaar en heeft een knik om, net als de zitting, de vorm van het lichaam te volgen. Een hoek verstelbaar, neerklapbaar exemplaar is verkrijgbaar als optie.



Anti-tip systeem

Met de voet wegzwenkbaar en klikt in positie.



Achterwielverlenging

Verhoogd de stabiliteit van de rolstoel aanzienlijk, indien gewenst.



Armsteunen

① kledingbeschermer, ② spatbord, ③ opklapbaar en in hoogte instelbaar lang of kort en ④ Rio hoogte instelbaar lang of kort zijn verkrijgbaar.

Technische gegevens

Invacare Spin ^X	355* / 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 / 500 mm (-50 mm)	0° / 3° / 6°	410 / 430 / 455 / 480 / 505 / 530 mm	± 12°	350 - 410 / 360 - 400 / 410 - 490 mm


Invacare Spin ^X	80° / 90° / 0° - 80°	320 - 440 / 410 - 530 mm	190 - 290 mm	Zitbreedte + 210 mm	290 mm	800 - 1260 mm

Invacare Spin ^X	760 - 1130 mm	125 / 135** kg	13 kg	7,5 kg

* Verkrijgbaar als special
** Alleen voor zitbreedte 480 en 505 mm


Alle product afmetingen zijn in millimeters om te voldoen aan de EN12183 standaard. Onze rolstoelen voldoen aan de ISO 7176-19 specificaties. Let erop dat speciale condities gelden voor de accessoires. Voor gedetailleerde informatie over transport in een voertuig en voor meer pre-sale informatie over deze rolstoel, verwijzen wij naar de website www.invacare-rea.com, onder Medium Active Wheelchairs / SpinX / Sales an Images in de product database. Voor informatie over gebruikersbeschrijving, gebruiksinstructie, instellingen en transport, verwijzen wij naar de gebruikershandleiding.

Frame kleuren

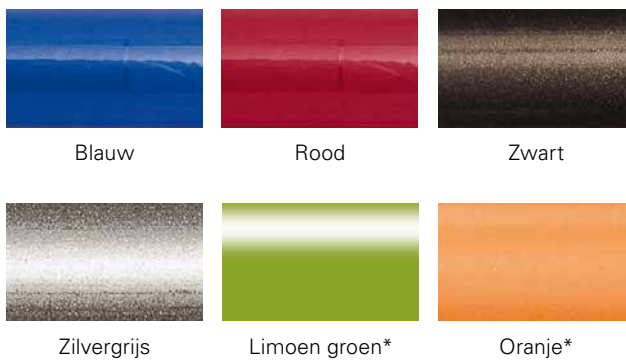

* Verkrijgbaar op speciale bestelling (extra levertijd!)

Bekleding

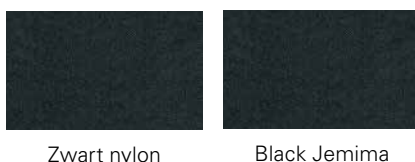

Invacare B.V.
Celsiusstraat 46 · 6716 BZ Ede
Nederland
Tel.: +31 (0) 318 - 695757
Fax +31 (0) 318 - 695758
Email: nederland@invacare.com
www.invacare.nl

© 2014 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafkondiging.

SpinX - NL - 04/2014

