

AQUATEC®

Orca

Badliften



De *Aquatec Orca* badlift vergemakkelijkt het baden. Beweegt soepel en stabiel naar beneden en weer naar boven, met één druk op de knop. Bijzonderheid: De rugleuning is tot 40° instelbaar om een comfortabele badpositie te bieden. De liften kunnen individueel worden aangepast met behulp van onze uitgebreide reeks opties.



- Lange levensduur door stabiel, robuust frame met versterkt schaarmechanisme
- Hoekverstelbare rugleuning tot 40°
- Nieuwste Lithium-Ion accu op mangaanbasis: bijzonder sterk
- Hoge belastbaarheid: 140 kg
- Afneembare bekleding, wasbaar in de wasmachine
- Eenvoudige, snelle reiniging door gladde afwerking
- Ergonomische, waterdichte handbediening - ligt stevig in de hand en blijft drijven
- Krachtig en stil met een onderhoudsvrij aandrijfsysteem



Aquatec Orca

Met hoekverstelbare rugleuning.

Opties en eigenschappen




Ook inzetbaar zonder bekleding



In 2 delen opvouwbaar




Zeer krachtig aandrijfsysteem

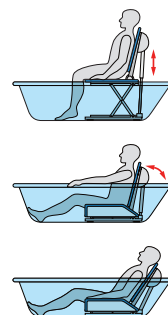

Werking van de lift

Accessories Aquatec badliften

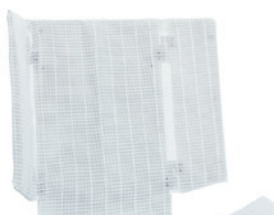

Hoekverstelbare speciale rug

Met individueel instelbare zijflappen voor extra veiligheid



In hoogte verstelbare hoofdsteun

Voor een veilige ondersteuning van hoofd en nek. Aanbevolen in combinatie met de speciale rug. De hoofdsteun wordt geleverd met bevestigingsset



Gelieve de maatvoering door te geven

Zijflappen op maat

Vereenvoudigen de transfer op de lift



Fixatiegordels

Voor extra veiligheid van de gebruiker



Borst- en bekkengordel

Gemaakt van zacht, duurzaam materiaal (lengte 980 - 1100 mm)




Stopper / abductieklos

V voorkomt onderuit glijden van de gebruiker



Hoogte adapter

Voor het verhogen van de zithoogte met 20, 40 of 60 mm

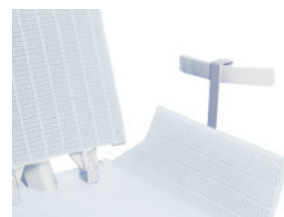

Zijflap deflector

In te zetten bij handgrepen in de badkuip





Draagtas

Voor het vervoeren en opslaan van badliften



Transferhulp Trans

Voor ondersteuning bij de transfer naar en van de Orca badlift

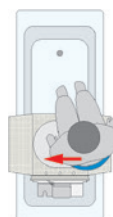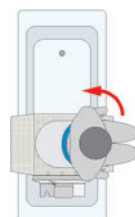



Illustratie transfer met behulp van Aquatec Trans

Technische gegevens

Meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.nl.

Afmetingen	Aquatec Orca
Zitbreedte zonder zijflappen	375 mm
Zitbreedte met zijflappen	715 mm (A)
Zitdiepte	490 mm (B)
Zithoogte max.	420 mm (C)
Zithoogte min.	60 mm
Breedte rugleuning	360 mm (D)
Hoogte rugleuning	665 mm (E)
Totale diepte (rugleuning rechtop)	650 mm (F)
Totale diepte (rugleuning op 40° ingesteld)	920 mm
Totale hoogte met rugleuning	1075 mm (G)
Afmeting bodemplaat	580 x 285 mm

Overige gegevens	
Totaal gewicht zonder handbediening	12,1 kg
Gewicht zitting	7,5 kg
Gewicht rugleuning	4,6 kg
Gewicht handbediening	0,4 kg
Gewicht accu	-
Belastbaarheid	140 kg
Rugleuning hoekinstelbaar tot 40°	40°
Kleur	Wit

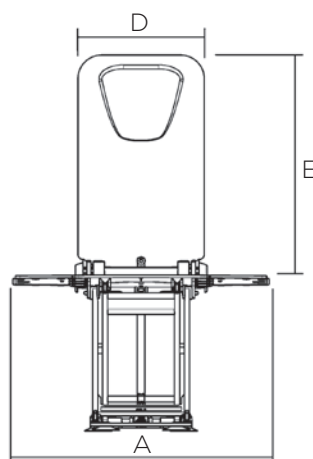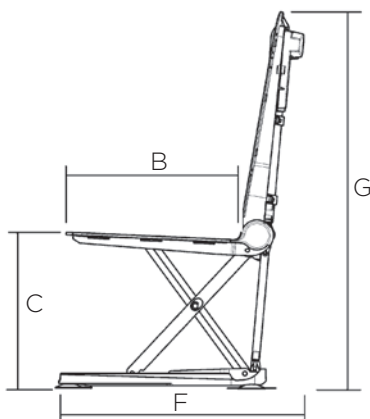

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland

