

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
 Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

KÜSCHALL K-SERIES 2.0

130 KG



5,1 KG



Crashtest
 ISO 7176-19
 Geldt alleen bij
 RH > 400 mm



Manuele actief rolstoel
 (vouwbaar frame)
 Maximaal gebruikersgewicht:
 120 kg
 Garantie: Algemeen: 1 jaar,
 frame: 5 jaar
 Prijzen in Euro exclusief BTW

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

♦ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

	Code	Omschrijving	€
BASISMODEL			
♦	DKA0067	Küschall K-Series 2.0	2372,00
♦	DKA1040	75° frame aluminium	
♦	DKA1340	Zitbreedte 440 mm	
♦	DKA1465	Zitdiepte 450 mm	
♦	DKA1520	Positie 3 (horizontale afstand onderzijde rugbuis tot wielas 110 mm)	
♦	DKA1650	Rughoogte 405 mm	
♦	DKA1765	Zithoogte voor 500 mm	
♦	DKA1835	Zithoogte achter 430 mm	
♦	DKA1946	Onderbeenlengte 430 mm	
♦	DKA2000	Rugbuizen Aluminium	
♦	DKA2100	Standaard rugframe met rugbeugel	
♦	DKA2220	Rugbekleding naspanbaar, premium zwart	
♦	DKA2400	Zonder duwhandvatten	
♦	DKA2540	Rughoek ingesteld op 82° ten opzichte van zitting	
♦	DKA2600	Standaard zitbekleding	
♦	DKA3200	Voetbeugel aluminium	
♦	DKA3405	Kledingbeschermers Standaard, opklapbaar	
♦	DKA4000	Framekleur Space Black	
♦	DKA4195	Merklabel	
♦	DKA4310	Merklabel kleur Rood	
♦	DKA5350	Voorwielen 5" Comfort met zwart rubber	
♦	DKA6020	Achterwielpositie standaard, geen verlenging	
♦	DKA6060	Standaard as	
♦	DKA6120	Achterwielpositie: derde positie vanaf voorkant gezien	
♦	DKA6210	Camber 3°	
♦	DKA6410	Achterwielen 24"	
♦	DKA6510	22", 24", 26" küschall Starec, kruis gespaakt	
♦	DKA6600	24", 25", 26" Schwalbe Rightrun zwart/grijs	
♦	DKA6790	Aluminium hoepels light, afstand 30 mm, zwart (22", 24", 25", 26")	
♦	DKA7210	Drukremmen met gebogen hendel	
		Totaalprijs standaardconfiguratie	2372,00

Küschall®
K-SERIES


De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

**FRAME****BEENSTEUNHOEK**

◆	DKA1040	75° frame aluminium	(niet i.c.m. zitdiepte > 450 mm)	0,00
	DKA1050	75° frame aluminium adductie	(niet i.c.m. zitdiepte > 450 mm, zithoogte voor < 480 mm, voetplaat opklapbaar)	332,00
	DKA1060	75° frame aluminium + 50 mm framelengte (nodig bij zitdiepte > 450 mm)	(niet i.c.m. zitdiepte < 425 mm, zithoogte voor < 500 mm)	179,00
	DKA1070	90° frame aluminium	(niet i.c.m. zitdiepte > 450 mm, voorwielen 5")	383,00
	DKA1080	90° frame aluminium adductie	(niet i.c.m. zitdiepte > 450 mm, zithoogte voor < 480 mm, voetplaat opklapbaar, voorwielen 5")	713,00
	DKA1090	90° frame aluminium + 50 mm framelengte (nodig bij zitdiepte > 450 mm)	(niet i.c.m. zitdiepte < 425 mm, zithoogte voor < 500 mm, voorwielen 5")	560,00

DKA1040, DKA1060,
DKA1070, DKA1090

DKA1050, DKA1080

DKA1060, DKA1090



DKA1200-DKA1220

VERING



	DKA1200	Vering zitting 40-65 kg	(niet i.c.m. Zitbreedte < 340 mm of > 460 mm, zitpositie 3, verlenging achterwielbevestiging, zithoogte achter < 440 mm)	407,00
	DKA1210	Vering zitting 65-85 kg	(niet i.c.m. Zitbreedte < 340 mm of > 460 mm, zitpositie 3, verlenging achterwielbevestiging, zithoogte achter < 440 mm)	407,00
	DKA1220	Vering zitting 85-100 kg	(niet i.c.m. Zitbreedte < 340 mm of > 460 mm, zitpositie 3, verlenging achterwielbevestiging, zithoogte achter < 440 mm)	407,00

ZITBREEDTE


	DKA1310	Zitbreedte 320 mm	(niet i.c.m. rugbuizen titanium, Matrx MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen, naspanbare of lichte zitbekleding, Matrx zitkussens, vering zitting)	158,00
	DKA1315	Zitbreedte 340 mm	(niet i.c.m. Matrx MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen, Matrx zitkussens)	158,00
	DKA1320	Zitbreedte 360 mm	(niet i.c.m. Matrx rugbreedte 410, 430, 460, 480 en 510 mm)	0,00
	DKA1325	Zitbreedte 380 mm	(niet i.c.m. Matrx rugbreedte 430, 460, 480 en 510 mm)	0,00
	DKA1330	Zitbreedte 400 mm	(niet i.c.m. Matrx rugbreedte 360, 430, 460, 480 en 510 mm)	0,00
	DKA1335	Zitbreedte 420 mm	(niet i.c.m. Matrx rugbreedte 360, 380, 460, 480 en 510 mm)	0,00
◆	DKA1340	Zitbreedte 440 mm	(niet i.c.m. lichte rug- of zitbekleding en Matrx rugbreedte 360, 380, 410, 480 en 510 mm)	0,00

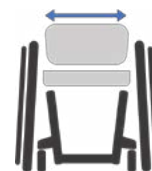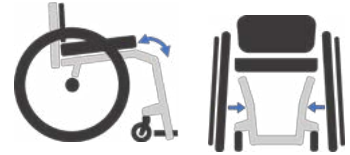

	DKA1345	Zitbreedte 460 mm	(niet i.c.m. lichte rug- of zitbekleding en Matrx rugbreedte 360, 380, 410 en 510 mm)	0,00
	DKA1350	Zitbreedte 480 mm	(niet i.c.m. lichte rug- of zitbekleding, Matrx MX2 rug en Matrx rugbreedte 360, 380, 410 en 430 mm, voetplaat opklapbaar, vering zitting)	158,00
	DKA1355	Zitbreedte 500 mm	(niet i.c.m. lichte rug- of zitbekleding, Matrx MX2 rug en Matrx rugbreedte 360, 380, 410, 430 en 460 mm, voetplaat opklapbaar, voetbeugel titanium, vering zitting)	158,00
ZITDIEPTE				
	DKA1410	Zitdiepte 350 mm	(niet i.c.m. zitpositie 1 of 2, lichte zitbekleding, Matrx zitkussens, + 50 mm framelengte)	158,00
	DKA1420	Zitdiepte 375 mm	(niet i.c.m. Matrx zitkussens, + 50 mm framelengte)	0,00
	DKA1435	Zitdiepte 400 mm	(niet i.c.m. + 50 mm framelengte)	0,00
	DKA1450	Zitdiepte 425 mm		0,00
◆	DKA1465	Zitdiepte 450 mm	(niet i.c.m. lichte zitbekleding)	0,00
	DKA1475	Zitdiepte 475 mm	(niet i.c.m. lichte zitbekleding, alleen i.c.m. + 50 mm framelengte)	0,00
	DKA1490	Zitdiepte 500 mm	(niet i.c.m. lichte zitbekleding, Matrx Flo-tech Lite zitkussen, alleen i.c.m. + 50 mm framelengte)	158,00
	DKA1495	Zitdiepte 525 mm	(niet i.c.m. lichte of naspanbare zitbekleding, Matrx Flo-tech Lite zitkussen, alleen i.c.m. + 50 mm framelengte)	158,00
ZITPOSITIE (met gereedschap aan te passen)				
	DKA1500	Positie 1, meest scherpe positie, zitframe meest naar achteren (horizontale afstand onderzijde rugbuis tot wielas 140 mm)	(niet i.c.m. zitdiepte 350 mm)	0,00
	DKA1510	Positie 2 (horizontale afstand onderzijde rugbuis tot wielas 125 mm)	(niet i.c.m. zitdiepte 350 mm)	0,00
◆	DKA1520	Positie 3 (horizontale afstand onderzijde rugbuis tot wielas 110 mm)	(niet i.c.m. Vering zitting)	0,00
	DKA1530	Positie 4 (horizontale afstand onderzijde rugbuis tot wielas 95 mm)		0,00
	DKA1540	Positie 5, minst scherpe positie, zitframe meest naar voren (horizontale afstand onderzijde rugbuis tot wielas 80 mm)		0,00
RUGHOOGTE				
	DKA1600	Rughoogte afhankelijk van Matrx rug (kies deze optie bij Matrx rug)	(alleen i.c.m. Matrx rug, niet i.c.m. transportset)	0,00
	DKA1605	Rughoogte 270 mm	(niet i.c.m. transportset)	0,00
	DKA1610	Rughoogte 285 mm	(niet i.c.m. transportset)	0,00
	DKA1615	Rughoogte 300 mm	(niet i.c.m. transportset)	0,00
	DKA1620	Rughoogte 315 mm	(niet i.c.m. transportset)	0,00
	DKA1625	Rughoogte 330 mm	(niet i.c.m. transportset)	0,00
	DKA1630	Rughoogte 345 mm	(niet i.c.m. transportset)	0,00
	DKA1635	Rughoogte 360 mm	(niet i.c.m. transportset, lichte rugbekleding)	0,00

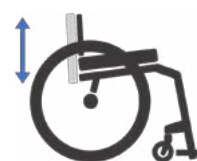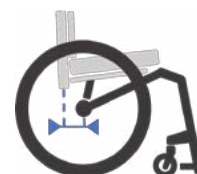

	DKA1640	Rughoogte 375 mm	(niet i.c.m. transportset, lichte rugbekleding)	0,00
	DKA1645	Rughoogte 390 mm	(niet i.c.m. transportset, lichte rugbekleding)	0,00
◆	DKA1650	Rughoogte 405 mm	(niet i.c.m. lichte rugbekleding)	0,00
	DKA1655	Rughoogte 420 mm	(niet i.c.m. lichte rugbekleding)	0,00
	DKA1660	Rughoogte 435 mm	(niet i.c.m. lichte rugbekleding)	0,00
	DKA1665	Rughoogte 450 mm	(niet i.c.m. lichte rugbekleding)	0,00
	DKA1670	Rughoogte 465 mm	(niet i.c.m. lichte rugbekleding)	0,00
	DKA1675	Rughoogte 480 mm	(niet i.c.m. lichte rugbekleding)	0,00
ZITHOOGTE VOOR (ZHV)				
	DKA1740	Zithoogte voor 450 mm	(niet i.c.m. voorwielen 5", adductie frame, + 50 mm framelengte)	0,00
	DKA1745	Zithoogte voor 460 mm	(niet i.c.m. voorwielen 5", adductie frame, + 50 mm framelengte)	0,00
	DKA1750	Zithoogte voor 470 mm	(niet i.c.m. voorwielen 5", adductie frame, + 50 mm framelengte)	0,00
	DKA1755	Zithoogte voor 480 mm	(niet i.c.m. + 50 mm framelengte)	0,00
	DKA1760	Zithoogte voor 490 mm	(niet i.c.m. + 50 mm framelengte)	0,00
◆	DKA1765	Zithoogte voor 500 mm		0,00
	DKA1770	Zithoogte voor 510 mm		0,00
	DKA1775	Zithoogte voor 520 mm		0,00
ZITHOOGTE ACHTER (ZHA)				
	DKA1815	Zithoogte achter 390 mm	(niet i.c.m. T-armsteunen, achterwielen 26", verlengde achterwielbevestiging, vering zitting)	0,00
	DKA1820	Zithoogte achter 400 mm	(niet i.c.m. T-armsteunen, verlengde achterwielbevestiging, vering zitting)	0,00
	DKA1825	Zithoogte achter 410 mm	(niet i.c.m. T-armsteunen, vering zitting)	0,00
	DKA1830	Zithoogte achter 420 mm	(niet i.c.m. vering zitting)	0,00
◆	DKA1835	Zithoogte achter 430 mm	(niet i.c.m. vering zitting)	0,00
	DKA1840	Zithoogte achter 440 mm		0,00
	DKA1845	Zithoogte achter 450 mm		0,00
	DKA1850	Zithoogte achter 460 mm		0,00
	DKA1855	Zithoogte achter 470 mm		0,00
	DKA1860	Zithoogte achter 480 mm		0,00
	DKA1865	Zithoogte achter 490 mm	(niet i.c.m. 24" achterwielen)	0,00
ONDERBEENLENGTE (moet bij 75° frame minimaal 30 mm kleiner dan zithoogte voor, bij 90° frame minimaal 40 mm kleiner dan zithoogte voor)				
	DKA1918	Onderbeenlengte 290 mm		0,00
	DKA1920	Onderbeenlengte 300 mm		0,00
	DKA1922	Onderbeenlengte 310 mm		0,00
	DKA1924	Onderbeenlengte 320 mm		0,00
	DKA1926	Onderbeenlengte 330 mm		0,00
	DKA1928	Onderbeenlengte 340 mm		0,00
	DKA1930	Onderbeenlengte 350 mm		0,00
	DKA1932	Onderbeenlengte 360 mm		0,00
	DKA1934	Onderbeenlengte 370 mm		0,00

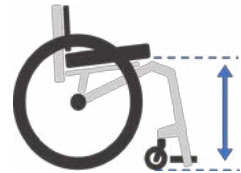


	DKA1936	Onderbeenlengte 380 mm		0,00
	DKA1938	Onderbeenlengte 390 mm		0,00
	DKA1940	Onderbeenlengte 400 mm		0,00
	DKA1942	Onderbeenlengte 410 mm		0,00
	DKA1944	Onderbeenlengte 420 mm		0,00
◆	DKA1946	Onderbeenlengte 430 mm		0,00
	DKA1948	Onderbeenlengte 440 mm		0,00
	DKA1950	Onderbeenlengte 450 mm		0,00
	DKA1952	Onderbeenlengte 460 mm		0,00
	DKA1954	Onderbeenlengte 470 mm		0,00
	DKA1956	Onderbeenlengte 480 mm		0,00
				
RUG				
RUGBUIZEN MATERIAAL				
◆	DKA2000	Rugbuizen Aluminium		0,00
	DKA2050	Rugbuizen Titanium	(niet i.c.m. Matrix rug, lage rugbeugel, in hoogte verstelbare duwhandvatten opbouw, transportset, zitbreedte 320 mm)	383,00
RUGFRAME TYPE				
◆	DKA2100	Standaard rugframe met rugbeugel	(niet i.c.m. Matrix MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen, geen rugbekleding, geïntegreerde hoogte verstelbaar duwhandvatten)	0,00
	DKA2150	Rugframe met lage rugbeugel t.b.v. Matrix of externe rug	(alleen i.c.m. Matrix rug of geen rugbekleding, niet i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten opbouw, rugbuizen titanium)	97,00
RUGBEKLEDING				
KUSCHALL RUGGEN				
	DKA2210	Rugbekleding lichtgewicht	(niet i.c.m. Matrix MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen, zitbreedte > 420 mm, rughogte > 345 mm, beide in hoogte verstelbare duwhandvatten)	199,00
◆	DKA2220	Rugbekleding naspanbaar, premium zwart	(niet i.c.m. Matrix MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen, geïntegreerde in hoogte verstelbare duwhandvatten)	0,00
	DKA2230	Naspanbare mesh aeroback, ventilerende rugbekleding	(niet i.c.m. Matrix MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen, geïntegreerde in hoogte verstelbare duwhandvatten)	199,00
	DKA2240	Zonder Rugbekleding	Selecteer bij keuze voor Matrix ruggen (alleen i.c.m. rugframe met lage rugbeugel)	0,00
MATRIX RUGGEN (INCLUSIEF BEVESTIGING)(HOOFDSTEUN BEVESTIGING BESCHIKBAAR VANAF 405MM HOOG)				
	DKA2300	Matrix MX2, hoogte 150 mm	(niet i.c.m. Matrix rugbreedte 480 en 510 mm, zitbreedte < 360 mm of > 460 mm, in hoogte verstelbare duwhandvatten opbouw, titanium rugbuizen, transportset, standaard rugframe)	1280,00



DKA2305	Matrx MX2, hoogte 230 mm	(niet i.c.m. Matrx rugbreedte 480 en 510 mm, zitbreedte < 360 mm of > 460 mm, in hoogte verstelbare duwhandvatten opbouw, titanium rugbuizen, transportset, standaard rugframe)	1280,00
DKA2310	Matrx MX2, hoogte 305 mm	(niet i.c.m. Matrx rugbreedte 480 en 510 mm, zitbreedte < 360 mm of > 460 mm, in hoogte verstelbare duwhandvatten opbouw, titanium rugbuizen, transportset, standaard rugframe)	1280,00
DKA2315	Matrx MX2, hoogte 405 mm	(niet i.c.m. Matrx rugbreedte 480 en 510 mm, zitbreedte < 360 mm of > 460 mm, in hoogte verstelbare duwhandvatten opbouw, titanium rugbuizen, transportset, standaard rugframe)	1280,00
DKA2316	Matrx Elite E2 Deep, hoogte 160 mm	(niet i.c.m. zitbreedte ≤ 340 mm, vaste en opvouwbare duwhandvatten)	948,00
DKA2317	Matrx Elite E2 Deep, hoogte 210 mm	(niet i.c.m. zitbreedte ≤ 340 mm, vaste en opvouwbare duwhandvatten)	948,00
DKA2318	Matrx Elite E2 Deep, hoogte 260 mm	(niet i.c.m. zitbreedte ≤ 340 mm, vaste en opvouwbare duwhandvatten)	948,00
DKA2320	Matrx Elite E2 Deep, hoogte 310 mm	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, in hoogte verstelbare duwhandvatten opbouw, vaste duwhandvatten, inklapbare duwhandvatten, titanium rugbuizen, transportset, standaard rugframe)	948,00
DKA2322	Matrx Elite E2 Deep, hoogte 360 mm	(niet i.c.m. zitbreedte ≤ 340 mm, vaste en opvouwbare duwhandvatten)	948,00
DKA2325	Matrx Elite E2 Deep, hoogte 410 mm	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, in hoogte verstelbare duwhandvatten opbouw, vaste duwhandvatten, inklapbare duwhandvatten, titanium rugbuizen, transportset, standaard rugframe)	948,00
DKA2330	Matrx Elite E2 Deep, hoogte 460 mm	(niet i.c.m. zitbreedte ≤ 340 mm, vaste en opvouwbare duwhandvatten)	948,00
DKA2331	Matrx Elite E2 Deep, hoogte 510 mm	(niet i.c.m. zitbreedte ≤ 340 mm, vaste en opvouwbare duwhandvatten)	948,00
DKA2332	Matrx Elite E2, hoogte 160 mm	(niet i.c.m. zitbreedte ≤ 340 mm, vaste en opvouwbare duwhandvatten)	842,00
DKA2334	Matrx Elite E2, hoogte 210 mm	(niet i.c.m. zitbreedte ≤ 340 mm, vaste en opvouwbare duwhandvatten)	842,00
DKA2335	Matrx Elite E2, hoogte 260 mm	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, in hoogte verstelbare duwhandvatten opbouw, vaste duwhandvatten, inklapbare duwhandvatten, titanium rugbuizen, transportset, standaard rugframe)	842,00
DKA2340	Matrx Elite E2, hoogte 310 mm	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, in hoogte verstelbare duwhandvatten opbouw, vaste duwhandvatten, inklapbare duwhandvatten, titanium rugbuizen, transportset, standaard rugframe)	842,00

	DKA2345	Matrx Elite E2, hoogte 360 mm	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm of > 460 mm, in hoogte verstelbare duwhandvatten opbouw, vaste duwhandvatten, inklapbare duwhandvatten, titanium rugbuizen, transportset, standaard rugframe)	842,00
	DKA2350	Matrx Elite E2, hoogte 410 mm	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, in hoogte verstelbare duwhandvatten opbouw, vaste duwhandvatten, inklapbare duwhandvatten, titanium rugbuizen, transportset, standaard rugframe)	842,00
	DKA2355	Matrx Elite E2, hoogte 460 mm	(niet i.c.m. zitbreedte ≤ 340 mm, vaste en opvouwbare duwhandvaten	842,00
	DKA2357	Matrx Elite E2, hoogte 510 mm	(niet i.c.m. zitbreedte ≤ 340 mm, vaste en opvouwbare duwhandvaten	842,00
MATRX RUGGEN KEUZE BREEDTE				
	DKA2360	Matrx rugsysteem breedte 360 mm (indicatieve rompbreedte 265 mm)		0,00
	DKA2362	Matrx rugsysteem breedte 380 mm (indicatieve rompbreedte 290 mm)		0,00
	DKA2364	Matrx rugsysteem breedte 410 mm (indicatieve rompbreedte 315 mm)		0,00
	DKA2366	Matrx rugsysteem breedte 430 mm (indicatieve rompbreedte 340 mm)		0,00
	DKA2368	Matrx rugsysteem breedte 460 mm (indicatieve rompbreedte 370 mm)		0,00
	DKA2370	Matrx rugsysteem breedte 480 mm (indicatieve rompbreedte 390 mm)		0,00
	DKA2372	Matrx rugsysteem breedte 510 mm (indicatieve rompbreedte 420 mm)		0,00
				
DKA2210		DKA2220	DKA2230	DKA2300-DKA2315
				
DKA2320,DKA2331		DKA2335-DKA2357		
DUWHANDVATTEN				
◆	DKA2400	Zonder duwhandvatten		0,00
	DKA2410	Vaste duwhandvatten, kort	(niet i.c.m. matrx Elite rug)	70,00
	DKA2420	Vaste duwhandvatten, lang	(niet i.c.m. matrx Elite rug)	70,00
	DKA2430	In hoogte verstelbaar, opbouw (niet i.c.m. standaard rugbekleding)	(niet i.c.m. rughoogte 285 tot 330 mm & buisarmsteun, rugframe met lage rugbeugel, rugbuizen titanium, lichte rugbekleding, matrx rug)	311,00

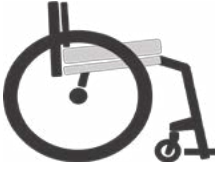

	DKA2440	Geïntegreerde hoogte verstelbaar duwhandvatten	(niet i.c.m. standaard rugframe met rugbeugel, lichte rugbekleding, rugbekleding naspanbaar premium zwart, naspanbare mesh aeroback)	183,00
	DKA2450	Inklapbare duwhandvatten (niet i.c.m. rugfixatiestang)	(niet i.c.m. rughoogte 315 tot 330 mm & buisarmsteun, matrxx Elite rug)	219,00
				
DKA2410		DKA2420	DKA2430	DKA2440
				
DKA2450				
RUGHOEK (met gereedschap aan te passen)				
	DKA2500	Rughoek ingesteld op 74° ten opzichte van zitting		0,00
	DKA2520	Rughoek ingesteld op 78° ten opzichte van zitting		0,00
◆	DKA2540	Rughoek ingesteld op 82° ten opzichte van zitting		0,00
	DKA2560	Rughoek ingesteld op 86° ten opzichte van zitting		0,00
	DKA2580	Rughoek ingesteld op 90° ten opzichte van zitting		0,00
	DKA2590	Rughoek ingesteld op 94° ten opzichte van zitting		0,00
				
ZITTING				
ZITBEKLEDING				
◆	DKA2600	Standaard zitbekleding		0,00
	DKA2610	Naspanbare zitbekleding, 1 klittenband strook	(niet i.c.m. zitbreedte 320 mm, zitdiepte 525 mm)	97,00
	DKA2630	Lichte zitbekleding	(niet i.c.m. zitbreedte 320 mm of > 420 mm, alleen i.c.m. zitdiepte 375 mm en 400 mm)	148,00
				
DKA2600		DKA2610	DKA2630	
ZITKUSSEN				
	DKA2700	Los zitkussen, circa 60 mm dik, met visco schuimlaag		87,00
	DKA2710	Matrx Flo-tech Lite zitkussen	(niet i.c.m. zitdiepte < 400 mm of > 475 mm, zitbreedte < 360 mm)	145,00
	DKA2720	Matrx Libra zitkussen, Stretch hoes zwart (Black Smooth)	(niet i.c.m. zitdiepte < 400 mm, zitbreedte < 360 mm)	573,00



						
DKA2700		DHA2710		DHA2720		
INGEKLIKT TASJE						
	DKA2800	Zittingtas, met clipsluiting				70,00
OPBERGVAKJES						
	DKA2910	Opbergvakje groot, met klittenband aan onderkant zitting vast te maken				81,00
						
DKA2800		DKA2910				
						
VOETSTEUN						
VOETPLATEN						
◆	DKA3200	Voetbeugel aluminium				0,00
	DKA3210	Voetbeugel titanium		(niet i.c.m. zitbreedte 500 mm)		270,00
	DKA3220	Voetplaat carbon hoekverstelbaar		(niet i.c.m. afdekking voor voetbeugel)		305,00
	DKA3230	Voetplaat opklapbaar, hoekverstelbaar (met beugel achterzijde beensteunen voor constructie behoud)		(niet i.c.m. adductie frame, zitbreedte > 460 mm, afdekking voor voetbeugel)		505,00
	SPECIAL	Carbon voetplaten, hoek en diepte verstelbaar				P.O.A.
AFDEKKING						
	DKA3290	Afdekking voor voetbeugel		(niet i.c.m. voetplaat carbon, voetplaat opklapbaar)		66,00
						
DHA3200, DHA3210		DHA3220, DHA3230		DHA3290	SPECIAL	
						
ZIJSCHOTTEN EN ARMSTEUNEN						
ZIJSCHOTTEN						
◆	DKA3405	Kledingbeschermers Standaard, opklapbaar				0,00
	DKA3420	Kledingbeschermers Carbon, opklapbaar				230,00
	DKA3440	Spatborden Carbon, uitneembaar		(niet i.c.m. T-armsteunen)		305,00
	DKA3450	Spatborden Standaard, uitneembaar		(niet i.c.m. T-armsteunen)		142,00



ARMSTEUNEN

DKA3480	Afneembare en wegklapbare buis-armsteun, in hoogte verstelbaar	(niet mogelijk i.c.m. e-motion twion adapterplaat, rughoogte < 315 mm)	270,00
DKA3490	Afneembare T armsteunen, hoogte instelbaar, kort (exclusief kledingbeschermers)	(niet i.c.m. zithoogte achter < 420 mm, spatborden)	270,00
DKA3495	Afneembare T armsteunen, hoogte instelbaar, lang (exclusief kledingbeschermers)	(niet i.c.m. zithoogte achter < 420 mm, spatborden)	270,00



DKA3405



DKA3420



DKA3440




DKA3450



DKA3480





DKA3490, DKA3495

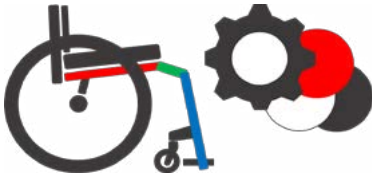**KLEUR EN PERSONALISEREN**

FRAMEKLEUR (let op getoonde afbeelding is ter indicatie, werkelijke kleur kan afwijken)

◆	DKA4000	Framekleur Space Black		0,00
	DKA4010	Framekleur Anthracite Grey		0,00
	DKA4020	Framekleur Pure White	(niet i.c.m. viper strepen licht grijs)	0,00
	DKA4030	Framekleur Carmine Red		0,00
	DKA4040	Framekleur Azure Blue		0,00
	DKA4060	Framekleur Flashy Yellow	(extra levertijd)	203,00
	DKA4070	Framekleur Violet	(extra levertijd)	203,00
	DKA4100	Framekleur Black Glossy (Glans)	(extra levertijd)	203,00
	DKA4130	Framekleur Silver Grey (Glans)	(extra levertijd)	203,00
	DKA4140	Framekleur Royal Blue (Glans)	(extra levertijd)	203,00
	DKA4150	Framekleur Ruby Red (Glans)	(extra levertijd)	203,00
	DKA4170	Framekleur Dynamite Orange (Metaal)	(extra levertijd)	203,00
	DKA4180	Framekleur Forest Green (Glans)	(extra levertijd)	203,00
	DKA4050	Framekleur Special Colour (stel zelf een kleur samen, geef hierbij RAL of andere informatie van de kleur op)	(niet i.c.m. viper strepen)(extra levertijd)	240,00

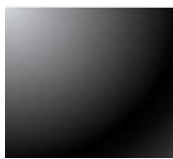

							
DKA4000	DKA4010	DKA4020	DKA4030				
							
DKA4040	DKA4100	DKA4130	DKA4140				
							
DKA4150	DKA4170	DKA4180	DKA4050				
DECORATIE OP FRAME							
	DKA4190	Viper-Strepen	101,00				
◆	DKA4195	Merklabel	(niet i.c.m. Viper Strepen) 0,00				
KLEUR MERKLABEL (let op getoonde afbeelding is ter indicatie, werkelijke kleur kan afwijken)							
	DKA4300	Merklabel kleur Zwart	(niet i.c.m. Viper Strepen) 0,00				
◆	DKA4310	Merklabel kleur Rood	(niet i.c.m. Viper Strepen) 0,00				
KLEUR VIPER-STREPEN (let op getoonde afbeelding is ter indicatie, werkelijke kleur kan afwijken)							
	DKA4200	Streepkleur Zwart	(niet i.c.m. Merklabel, Framekleuren met meerprijs) 101,00				
	DKA4210	Streepkleur Donker Grijs	(niet i.c.m. Merklabel, Framekleuren met meerprijs) 101,00				
	DKA4220	Streepkleur Licht Grijs	(niet i.c.m. Framekleur Pure White, Merklabel, Framekleuren met meerprijs) 101,00				
	DKA4230	Streepkleur Rood	(niet i.c.m. Merklabel, Framekleuren met meerprijs) 101,00				
	DKA4240	Streepkleur Blauw	(niet i.c.m. Merklabel, Framekleuren met meerprijs) 101,00				
	DKA4250	Streepkleur Goud	(niet i.c.m. Merklabel, Framekleuren met meerprijs) 101,00				
							
							
DKA4300	DKA4310	DKA4200	DKA4210	DKA4220	DKA4230	DKA4240	DKA4250

**WIELEN****VOORWIELEN**

	DKA5000	Voorwielen 3" Supersport		50,00
	DKA5050	Voorwielen 4" Everyday met zwart rubber		50,00
	DKA5100	Voorwielen 4" Comfort met zwart rubber		121,00
	DKA5150	Voorwielen 4" Starec zwart		121,00
	DKA5200	Voorwielen 4" FrogLegs met zwarte aluminium velg		219,00
	DKA5250	Voorwielen 4" FrogLegs met zilveren aluminium velg		219,00
	DKA5300	Voorwielen 5" Everyday met zwart rubber	(niet i.c.m. zithoogte voor < 480 mm, 90° frame)	50,00
◆	DKA5350	Voorwielen 5" Comfort met zwart rubber	(niet i.c.m. zithoogte voor < 480 mm, 90° frame)	0,00
	DKA5400	Voorwielen 5" Starec zwart	(niet i.c.m. zithoogte voor < 480 mm, 90° frame)	121,00
	DKA5450	Voorwielen 5" FrogLegs met zwarte aluminium velg	(niet i.c.m. zithoogte voor < 480 mm, 90° frame)	219,00
	DKA5500	Voorwielen 5" FrogLegs met zilveren aluminium velg	(niet i.c.m. zithoogte voor < 480 mm, 90° frame)	219,00



DKA5000



DKA5050, DKA5300




DKA5100, DKA5350



DKA5150, DKA5400

DKA5200, DKA5250,
DKA5450, DKA5500**ACHTERWIELFIXATIE / ACHTERWIELVERLENGING** (meer druk op voorwielen t.b.v. handbiken, betere drukverdeling bij dubbele amputatie)

◆	DKA6020	Achterwielpositie standaard, geen verlenging		0,00
	DKA6040	Verlenging achterwielbevestiging verder naar achteren, lang (5 posities).	(niet i.c.m. carbon as, zithoogte achter < 410 mm, vering zitting)	219,00

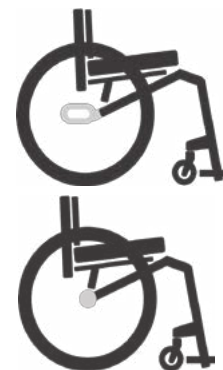



DKA6020



1 2 3 4 5

DKA6040

Enkele as:

☐ Positie 1:
-Standaard as
☐ 0° camber
☐ 3° camber
☐ 6° camber
-Vario as (camber instelbaar)

☐ Positie 2:
-Standaard as
☐ 0° camber
☐ 3° camber
☐ 6° camber
-Vario as (camber instelbaar)

☐ Positie 3:
-Standaard as
☐ 0° camber
☐ 3° camber
☐ 6° camber
-Vario as (camber instelbaar)

☐ Positie 4:
-Standaard as
☐ 0° camber
☐ 3° camber
☐ 6° camber
-Vario as (camber instelbaar)

☐ Positie 5:
-Standaard as
☐ 0° camber
☐ 3° camber
☐ 6° camber
-Vario as (camber instelbaar)

Dubbele as:

☒ Positie 1:
-Vario as (camber instelbaar)
-Standaard as
☐ 0° camber
☐ 3° camber
☐ 6° camber

☒ Positie 5:
-Standaard as
☐ 0° camber
☐ 3° camber
-Vario as (camber instelbaar)

☒ Positie 5:
-Standaard as
☐ 0° camber
☐ 3° camber
☐ 6° camber
-Vario as (camber instelbaar)

☒ Positie 5:
-Standaard as
☐ 3° camber
☐ 6° camber

ASTYPE 1STE ACHTERWIEL-AS

	DKA6050	Vario-as, verstelbare camber 1°/3°/7°/10°	(niet i.c.m. spaakbeschermers, anti-lek bescherming)	387,00
◆	DKA6060	Standaard as		0,00
	DKA6070	Carbon as	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat, verlenging achterwielbevestiging)	152,00

ACHTERWIELPOSITIE (met gereedschap aan te passen)

	DKA6100	Eerste positie (meest scherpe positie)		0,00
	DKA6110	Tweede positie	(niet i.c.m. 2de as)	0,00
◆	DKA6120	Derde positie	(niet i.c.m. 2de as)	0,00
	DKA6130	Vierde positie	(niet i.c.m. 2de as)	0,00
	DKA6140	Vijfde positie	(niet i.c.m. 2de as)	0,00

CAMBER 1STE AS


	DKA6200	Camber 0°		0,00
◆	DKA6210	Camber 3°		0,00
	DKA6220	Camber 6°	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat, 2de as: vario-as)	0,00

ASTYPE 2DE ACHTERWIEL-AS (alleen mogelijk met verlengde achterwielbevestiging, t.b.v. 2 verschillende achterwielstanden. Hierbij zal eerste as in 1ste positie gezet worden en 2de as in 5de positie van de verlengde achterwielbevestiging)

	DKA6230	2de as: Standaard as		0,00
	DKA6240	2de as: Vario-as, verstelbare camber 1°/3°/7°/10°	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat, performance remmen, 1ste standaard as 6° camber)	387,00

CAMBER 2DE AS (max 3 graden camber verschil met 1ste as)

	DKA6250	2de as: Camber 0°		0,00
--	---------	-------------------	--	------

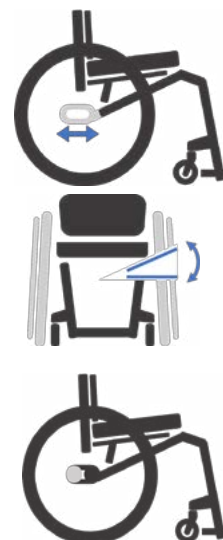


	DKA6260	2de as: Camber 3°		0,00
	DKA6270	2de as: Camber 6°		0,00
TETRA QUICK RELEASE ASSEN				
	DKA6300	Tetra Quick Release assen (makkelijker losmaken van de achterwielen t.b.v. beperkte kracht of handfunctie)	(niet i.c.m. Spinerger LXX wielen, e-motion / twion adapterplaat)	132,00
   				
DKA6040 DKA6050, DKA6240 DKA6060, DKA6230 DKA6070				
				
DKA6300				
ACHTERWIEL GROOTTE				
◆	DKA6410	Achterwielen 24"	(niet i.c.m. zithoogte achter > 480 mm)	0,00
	DKA6420	Achterwielen 25"	(niet i.c.m. anti-lek bescherming, e-motion / twion adapterplaat)	0,00
	DKA6430	Achterwielen 26"	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat, actieve remmen, zithoogte achter < 400 mm)	0,00
ACHTERWIEL TYPE				
	DKA6500	24" Actief (incl. alu hoepels & light band grijs) (andere banden beschikbaar)	(niet i.c.m. spaakbeschermers, anti-lek bescherming)	0,00
◆	DKA6510	22", 24", 26" küschall Starec zwart, kruis gespaakt		0,00
	DKA6520	24", 25" High Performance (Starec naaf)		478,00
	DKA6550	24", 25" Spinerger LXX wielen	(niet i.c.m. massieve banden)	723,00
   				
DKA6500 DKA6510 DKA6520 DKA6550				
BANDEN				
◆	DKA6600	24", 25", 26" Schwalbe Rightrun zwart/grijs		0,00
	DKA6610	24" Schwalbe Rightrun blauw		97,00
	DKA6620	24", 25", 26" Marathon Plus band Schwalbe (anti-lek inleg)	(niet i.c.m. anti-lek bescherming)	97,00
	DKA6630	24", 25" Schwalbe One (extra laag bescherming binnenkant)		97,00
	DKA6640	24" Banden met blokprofiel, 7 bar		97,00
	DKA6660	24" Massieve banden, zwart	(niet i.c.m. 24" Spinerger LXX wielen)	97,00



			
DKA6600	DKA6610	DKA6620	DKA6630
			
DKA6640	DKA6650	DKA6660	
ANTI-LEK BESCHERMING			
DKA6680	Anti-lek bescherming	(niet i.c.m. marathon plus band Schwalbe, 24" Actief achterwiel)	117,00
HOEPELS			
DKA6700	Supergripp, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (22", 24", 26")		254,00
DKA6710	Staal, afstand 30 mm (24", 26")		81,00
DKA6720	Titanium, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24")		223,00
DKA6740	Hoepels Carbolife Gekko, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24", 25")		423,00
DKA6750	Hoepels Carbolife Gekko S(mall), afstand 30 mm (24", 25")		423,00
DKA6760	Hoepels Carbolife Curve L(arge), afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24")		423,00
DKA6770	Hoepels Carbolife Quadro, afstand 30 mm (24")		423,00
DKA6780	Aluminium hoepels light, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (22", 24", 25", 26")		0,00
♦ DKA6790	Aluminium hoepels light, afstand 30 mm, zwart (22", 24", 25", 26")		0,00
			
DKA6700	DKA6710	DKA6720, DKA6730	DKA6740, DKA6750
			
DKA6760	DKA6770	DKA6780, DKA6800	DKA6790
SPAAKBESCHERMERS (niet i.c.m. Spinergy wielen)			
DKA6900	Transparant (24" en 26")		162,00
DKA6910	Zwart (24", 26")		162,00
			
DKA6900	DKA6910		

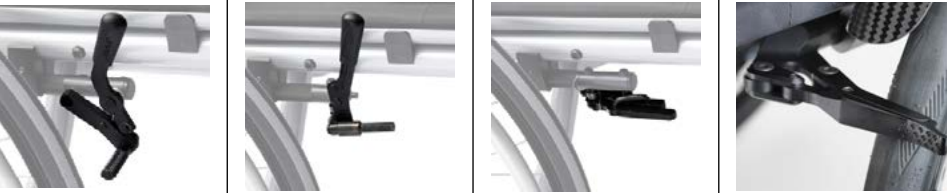

REMME				
◆	DKA7210	Drukremmen met gebogen hendel		0,00
	DKA7230	Performance remmen	(niet i.c.m. vario as, remhendelverlengers)	230,00
	DKA7240	Schaarremmen (niet in de 1ste achterwielpositie)	(niet i.c.m. 26" wielen, remhendelverlengers)	111,00
	DKA7250	Actief remmen lichtgewicht	(niet i.c.m. remhendelverlengers)	132,00
REMHENDELVERLENGER				
	DKA7300	Remhendelverlengers	(niet i.c.m. performance, schaar of licht actieve remmen)	56,00
				
DKA7210 DKA7230 DKA7240 DKA7250				
				
DKA7300				
				
VEILIGHEIDSOPTIES				
ANTI-TIP SYSTEEM				
	DKA7500	Anti-tip rechts	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat)	152,00
	DKA7510	Anti-tip links	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat)	152,00
	DKA7520	Anti-tip beide zijden	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat, transportwielen)	301,00
TRANSPORTSET				
	DKA7600	Transport set (inclusief gordel en stickers, zonder tie down system) (voldoet hiermee aan crashtest, nodig voor vervoer rolstoel met inzittende, in een voertuig)	(niet i.c.m. rughoogte < 405 mm, rugbuizen titanium)	101,00
GORDEL				
	DKA7800	Heupgordel met clipsluiting		77,00
REFLECTORSET				
	DKA7900	Reflectorset, gemonteerd (afhankelijk van type wiel)		40,00
	DKA7910	Reflectorset, los geleverd (afhankelijk van type wiel)		40,00
				
DKA7500 - DKA7520 DKA7800 DKA7900, DKA7910				



**BEGELEIDERS OPTIES****FRAME BESCHERMING**

DKA8010	Voorframe beschermers (paar)	81,00
---------	------------------------------	-------

STOKHOUDER

DKA8200	Stokhouder rechts	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat)	97,00
DKA8210	Stokhouder links	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat)	97,00

TRANSPORT WIELEN

DKA8300	Transportwielen (alleen in combinatie met anti-tippers. bij gebruik kunnen de achtwielen eraf gehaald worden, waardoor de stoel smaller wordt voor nauwe doorgangen)		397,00
---------	--	--	--------



DKA8010



DKA8200, DKA8210



DKA8300

**ACCESSOIRES**

DKA8500	Pomp	26,00
DKA8550	Gereedschapsset	21,00
DKA8600	Aanpasset zithoogte	107,00
DKA8680	24" Mountainbike wielen + reistas	1223,00



DKA8500



DKA8550



DKA8600



DKA8680

ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk prijslijst)

	Alber e-motion M15/M25, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader	
	Alber twion M24, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader	
	Alber SMOOV one, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader	
	Alber e-fix E35/36, elektrische hoepelondersteuning*	
	*Levering onder condities die gelden voor de Alber producten	



E-motion M15/M25



Twion M24



SMOOV one



E-fix E35/36




SPECIALE AANPASSING


DHA0000	MYküschall speciale aanpassing	POA
---------	--------------------------------	-----

AANPASSINGEN / OVERIGE OPMERKINGEN

	Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden? / Overige opmerkingen	
--	--	--

MEETGIDS

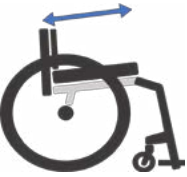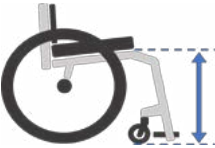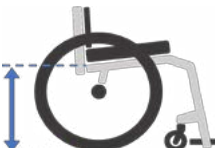GEBRUIKERSMATEN*		ROLSTOELMATEN
Zitbreedte  De zitbreedte is belangrijk voor het comfort van de gebruiker. Deze moet breed genoeg zijn voor goede drukverdeling, maar smal genoeg voor eenvoudig manoeuvreren met de rolstoel	 - laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten - positioneer links en rechts blokken tegen de heupen aan en meet de afstand hiertussen - Bepaal met de eindgebruiker in hoeverre de rolstoel aangesloten mag zitten. (Voor winterkleding wordt er meestal 2 cm bij op geteld om de rolstoelmaat te krijgen)	 - Haal het zitkussen weg - Meet de afstand tussen de buitenzijden van de zitbuisen, de effectieve zitbreedte is tussen de zijschotten aan de achterkant van de rolstoel
Zitdiepte  Een juiste zitdiepte instelling zorgt voor zowel een goede verdeling van het gebruikersgewicht over de gehele zitting, als voor het voorkomen van drukpunten en huidirritatie in het gebied achter de knie	 - laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten - Meet de afstand tussen het uiterste punt aan de achterkant van de billen tot de knieholten - Haal van deze afstand ongeveer 4 cm af (afhankelijk van het postuur van de gebruiker en de beensteun hoek) om de rolstoelmaat te krijgen - Bij een Matrix kussen wordt door de wijze van bevestiging de effectieve zitdiepte korter, het kiezen van 1 diepere maat wordt hierbij aanbevolen.	 - Haal het zitkussen weg - Meet de afstand van de voorste rand van de rugleuning buis (zonder de bekleding) tot de voorste rand van de zitbekleding
Onderbeenlengte  De juiste onderbeenlengte instelling zorgt ervoor dat de voetplaten op de correcte hoogte zitten, hierdoor kan een gedeelte van het lichaamsgewicht door de voeten worden opgevangen. Voetplaten moeten tenminste 2 cm speling hebben ten opzichte van de grond.	 - laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten - Meet de afstand van de hak van de schoen tot de knieholte - Haal van deze afstand de dikte van het kussen af om de rolstoelmaat te krijgen	 - Haal het zitkussen weg - Meet de afstand van de achterste rand van de voetplaat tot de voorste rand van de zitbekleding (zonder inzakking van zitbekleding)
Zithoogte voor  Een correcte instelling van de zithoogte aan de voorzijde zorgt voor optimaal gebruik- en rijgemak, bijvoorbeeld passend bij de gewenste transfers en geeft voldoende ruimte om onder tafels te komen.	 - laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten - Meet de verticale afstand tussen de grond en de knieholte - Zorg dat deze afstand minimaal de onderbeenlengte +4 cm is, dit is om genoeg ruimte boven de ondergrond te houden voor de voetplaat - Haal de dikte van het kussen van deze afstand af om de zithoogte voor als rolstoelmaat te krijgen	 - Haal het zitkussen weg - Meet de verticale afstand van de vloer tot de voorste rand van de zitbekleding (zonder inzakking van zitbekleding), dus bovenkant zitbuis voorzijde gemeten
Zithoogte achter  De zithoogte achter zorgt samen met de zithoogte voor voor de gewenste zithoek, de wig. Hiermee kan zitstabiliteit van het bekken en daarmee meer mobiliteit voor het bovenlichaam worden gemaakt. De zithoogte achter heeft ook invloed op de bereikbaarheid van de armen tot de hoepels van de achterwielen.	 - De zithoogte achter wordt bepaald door de zithoogte voor in combinatie met de gewenste zithoek (wig) - Zithoogte achter = zithoogte voor minus de wig	 - Haal het zitkussen weg - Meet de verticale afstand tussen de vloer en de achterste rand van de zitbekleding (zonder inzakking van bekleding) dus bovenkant zitbuis achterzijde gemeten

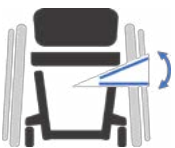Rughoogte  De rughoogte is afhankelijk van de functionaliteit van de gebruiker. Een correcte rughoogte zorgt voor een goede zithouding in combinatie met optimale bewegingsvrijheid.	 ▪ laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten ▪ Meet de verticale afstand van die ondergrond tot de schouderbladen ▪ Als meer rompondersteuning nodig is, meet dan tot aan de benodigde hoogte van ondersteuning ▪ Als minder rompondersteuning nodig is, verminder dan de rughoogte om de bewegingsvrijheid te bevorderen ▪ Tel van deze afstand de dikte van het kussen bij op om de rolstoelmaat te krijgen	 ▪ Haal het zitkussen weg ▪ Haal de rugbekleding weg ▪ Meet de afstand tussen de bovenkant van de zitbekleding tot de bovenkant van de spanbanden rugleuning
Rughoek  De bepaling van de rughoek is afhankelijk van de zithoek, de mate van rompstabiliteit en neiging om naar voren te vallen. Een grotere rughoek (rugleuning meer naar achteren) geeft een meer rustende houding, een kleinere hoek geeft een meer actieve houding.	 ▪ Onderzoek hoe de rolstoel gebruikt wordt. Ga na of er sprake is van lumbale kyfose /lordose (achterwaartse/voorwaartse bekkenkanteling) of andere houdingsbeperkingen en ga na of deze corrigeerbaar zijn. Zo ja, corrigeren. Zo nee, ondersteunen. Bepaal bovendien welke drukontlasting en mate van stabiliteit/activiteit nodig is en wat als het meest prettig ervaren wordt.	▪ De rughoek is bij de Küschall stoelen (uitzondering KSL) meestal met enkele handelingen aan te passen. Zie de servicehandleidingen voor informatie. ▪ Houdt er rekening mee dat de rughoek t.o.v. het zitvlak wordt gemeten, de zithoek (wig) heeft dus invloed op de rughoek t.o.v. de grond.
Zithoek  Een grotere zithoek (wig) kan meer stabiliteit /comfort geven en relatief meer druk naar de rug verdelen. Een grote zithoek zorgt voor stabiliteit van het bekken. Een negatieve zithoek (waarbij zithoogte voor lager is dan achter) kan helpen bij trippelen en transfers; nb: wees hierbij bewust van grotere kans op glijden	 ▪ Onderzoek hoe de rolstoel gebruikt wordt. Ga na of er sprake is van lumbale kyfose /lordose (achterwaartse/voorwaartse bekkenkanteling) of andere houdingsbeperkingen en ga na of deze corrigeerbaar zijn. Zo ja, corrigeren. Zo nee, ondersteunen. Bepaal bovendien welke drukontlasting en mate van stabiliteit/activiteit nodig is en wat als het meest prettig ervaren wordt.	▪ Afhankelijk van het model (K-Series/Compact/Champion/KSL) kan de zithoek aangepast worden d.m.v. de zithoogte voor en achter. Zie de servicehandleidingen voor de mogelijkheden. ▪ Door de vele aanpassingsmogelijkheden bij de Küschall stoelen (uitzondering KSL), is het mogelijk om de stoel verder precies aan te passen of na veranderende eisen en wensen aan te passen aan de gebruiker.
Camber  De wielcamber is de hoek die de achterwielen maken. Een grotere camber hoek vergroot het steunvlak en daarmee de stabiliteit van de rolstoel. Een grotere camberhoek draait makkelijker. Het zal de rolstoel onderin breder maken. De meest gangbare camberstand is rond de 3°	De camber stand is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Deze wordt mede bepaald door de gewenste activiteiten. Bijvoorbeeld meer camber bij rolstoelbasketbal.	De K-Series en KSL hebben de camberstand in de as voor de wielen ingebouwd. Met de Vario-as bij de K-Series is de camberstand verstelbaar. De Champion en de Compact hebben een camberbus die door een camberbus met een andere hoekstand vervangen kan worden