



reddot award 2014
winner

Invacare | **Colibri®**



De *Invacare* **Colibri®**
Eenvoudig uit elkaar te halen en
weer in elkaar te zetten



Yes, you can.®



Eenvoudig uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten

Niet denken - maar doen! In minder dan een minuut is de **Colibri** uit elkaar te halen voor transport.

Dankzij het unieke *Invacare*® **LiteLock™** systeem kan de scooter gemakkelijk uit elkaar worden gehaald zonder gereedschap en past eenvoudig in de kofferbak.

De *Invacare*® **Colibri** brengt je overal, waar je maar wilt! In het handige, ruime mandje aan de voorzijde kun je al je spullen goed kwijt.

Tot slot laten de wielen geen zwarte strepen achter op de vloer.



LiteLock[®]
system

Invacare | **Colibri®**



De *Invacare* **Colibri®**
Mix en match je eigen stijl,
met gemak



Yes, you can.®



Mix en match je eigen stijl, met gemak

Waarom zou een scootmobiel elke dag dezelfde kleur moeten hebben?
Waarom zou hij niet matchen met je kleren of je stemming?

De *Invacare® Colibri®* is ontworpen volgens de nieuwste trends. Je kunt dus de kleuren kiezen die jij het mooist vindt.

Je kunt naar keuze de kleurpanelen verwisselen. Hiervoor is geen gereedschap nodig, want het clip-on mechanisme is snel en eenvoudig en garandeert dat alles goed op z'n plek blijft - totdat je weer veranderen wilt.




Invacare | **Colibri®**



De Invacare® **Colibri®**
De kleurrijke route naar
comfortabel en veilig rijden



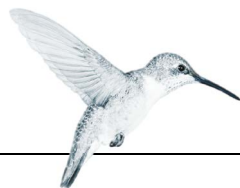

Veilig, wendbaar en comfortabel

Het *Invacare® LiteLock™* systeem maakt het (de)monteren van de scootmobiel eenvoudig. Daarnaast zorgt het ervoor dat de scootmobiel stevig in elkaar zit, zodat er veilig gereden kan worden. Extra ingebouwde reflectoren bieden nog meer veiligheid.

De *Invacare® Colibri®* is ontworpen om één van de meest draagbare micro scooters op de markt te zijn. Met zijn kleine omvang biedt de **Colibri®** goede wendbaarheid in smalle, beperkte ruimtes.

Het ergonomische stuur biedt verschillende positioneringsopties voor de handen om vermoeide handen en gewrichten te voorkomen. De comfortabele gepolsterde zitting met elegante, witte stiknaden zorgt voor een comfortabele rit.



LiteLock[®]
system

Invacare | **Colibri®**



De Invacare® **Colibri®**
Een brede reeks accessoires



Yes, you can.®



Personaliseer uw *Invacare® Colibri*

Zittingvering voor meer comfort

Voor verhoogd comfort kan de optionele veringsset worden gekozen. De robuuste zittingvering maakt een groot verschil op oneffen terrein.



Kies voor 12 of 18 Ah accu's

Voor diegenen die met een gerust hart verder willen rijden, is er een grotere accu verkrijgbaar. En, de accu opladen is eenvoudig - dit kan zowel op de scooter als los ervan, in de garage of in huis.




Beschermhoes

Als je je scootmobiel buiten wil stallen kun je 'm beschermd wegzetten onder deze hoes. Zo blijft hij droog, zodat de werking goed blijft.



Kruk- en stokhouder

Voor hen die een kruk of stok nodig hebben.

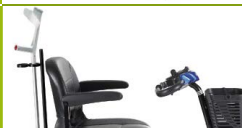

Wielen

De *Invacare® Colibri* is er met kleine wielen voor in kleine ruimtes of een set grotere wielen voor buitenritten op oneffen terrein op hobbelige straten.



Persoonlijke sleutel

Voor extra veiligheid kun je de scootmobiel op slot zetten met een persoonlijke sleutel. Omdat de cylinder met 2 sleutels komt, is het raadzaam wat reserve exemplaren te laten maken.



Mandje achterzijde

Het mandje voor achterop is perfect om te winkelen en kan zonder gereedschap worden vastgemaakt. Simpelweg plaatsen als het nodig is en opbergen als de boodschappen binnen zijn.




Invacare® | **Colibri®**



De Invacare® **Colibri®**
Veilig, wendbaar en comfortabel



Yes, you can.®

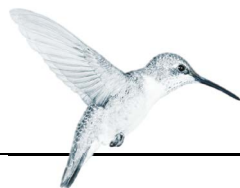

Technische gegevens



465 mm



400 mm



370 - 420 mm



385 mm



505 mm



4 wielen

1010 mm



44 kg (12 Ah)
49 kg (18 Ah)



136 kg




2 x 12 Ah
2 x 18 Ah



2200 mm

3 wielen


1010 mm

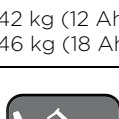


42 kg (12 Ah)
46 kg (18 Ah)



136 kg

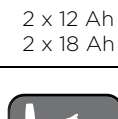

2 x 12 Ah
2 x 18 Ah

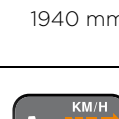

1940 mm



45 mm



6° / 10,5%



200 W



Tot 16 km *
(met 18 Ah accu)



8 km/u



Yes, you can.®

* Tot 11 km met 12 Ah accu

© 2025 Invacare International Sàrl. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafkondiging.



Compliant with the directive on the Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment - RoHS (2011/65/EC)

