



*Invacare*® | **Soft Tilt™**


Innovatie in ondersteuning, positionering  
en comfort in bed



De *Invacare Soft Tilt* is een innovatief systeem dat is ontworpen om:

- zorgverleners te ondersteunen met de dagelijkse verzorgingsmomenten en transfers
- automatisch de druk te verdelen tijdens het liggen in bed
- cliënten comfort te bieden door hen te “wiegen”.

De *Soft Tilt* kan eenvoudig worden geïnstalleerd op het Invacare SB 755-bed en werkt in combinatie met de bestaande verstelmogelijkheden van het bed en het matras.

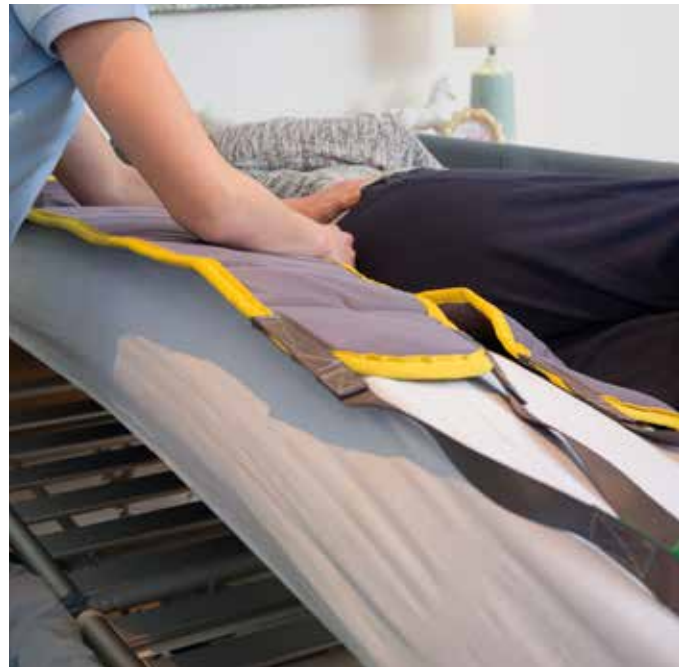

### Eén zorgverlener voor alle zorghandelingen

De *Soft Tilt* kan eenvoudig manueel worden bediend. Daardoor kan een zorgverlener alle zorghandelingen alleen verrichten. Door middel van de eenvoudige handbediening kan de zorgverlener de vleugels omhoog brengen tot 60°. Hierdoor kan de zorgverlener eenvoudig de persoonlijke verzorging uitvoeren en met minimale fysieke belasting de tilmat of glijzeil aanbrengen.

Daarnaast kan de zorgverlener met de *Soft tilt* de verstelmogelijkheden van het bedframe gebruiken om de cliënt eenvoudig te begeleiden in de transfer in en uit bed. Door de minimale instapinspanning worden klachten aan het bewegingsapparaat voorkomen.



### Automatische drukverdeling

De *Soft Tilt* kan worden geprogrammeerd om cliënten met verschillende tussenpozen en hoeken de hele nacht door te draaien; dit zal druk verminderen en de ontwikkeling van decubitus voorkomen. Bij automatisch gebruik zullen de vleugels nooit hoger komen dan 30° om een optimale veiligheid en comfort te garanderen tijdens het slapen van de cliënt.

### Meer slaapcomfort voor de cliënt


Door de stille, zachte en geautomatiseerde bewegingen van de *Soft Tilt* kunnen cliënten genieten van een rustige en ongestoorde “wiegende” slaap.





### Verstelbaarheid

Het systeem werkt in combinatie met de bewegingen van het bedframe waardoor het positioneren en transferen comfortabel verloopt.

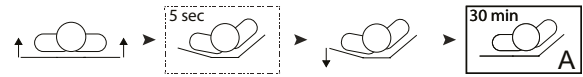

### Comfortabele, geautomatiseerde drukverdeling

Bij automatisch gebruik zal de secundaire vleugel iets omhoog gaan om extra ondersteuning en comfort te bieden voor de cliënt. Zodra de cliënt de gewenste positie heeft bereikt zal de secundaire vleugel terugkeren naar een horizontale positie.



### Manuele bediening

Bij handmatige bediening met de handset kunnen de vleugels worden verhoogd tot 60° voor bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of het aanleggen van een tilmat.



### Programmeerbare bedieningsunit

De gebruiksvriendelijke bedieningsunit wordt geleverd met een vooraf ingesteld programma (automatisch) en twee aanpasbare programma's die voldoen aan de individuele wensen. Eenmaal geprogrammeerd kunnen geautomatiseerde bewegingen worden geactiveerd met één druk op de knop.



### Wiegen voor comfort en ontspanning

**Soft Tilt** kan worden geprogrammeerd om de cliënt voorzichtig van links naar rechts te draaien wanneer beide vleugels omhoog zijn.



### Intuïtieve handset







Duidelijk en gemakkelijk te gebruiken handset voor manueel gebruik.



### Hoes

Blauwe hoes met elastische bandjes houdt de matras op zijn plaats. Machine wasbaar tot 80 graden.

Voor meer uitgebreide informatie over dit product en de gebruiksaanwijzing, raadpleegt u [www.invacare.nl](http://www.invacare.nl).

	Max. hoek manueel modus	Max. hoek in automatische modus	Tijdsduur in geautomatiseerde modus	Max. gebruikersgewicht	Zwaarste onderdeel v.h. product	Wasbare hoes
<b>Soft Tilt</b>	 60 °	 30 °	 0 - 180 minuten	 165 kg Belastbaar gewicht 185 kg	 15 kg	 80°


### Let op

Het bed mag niet worden gebruikt door cliënten jonger dan 12 jaar, of door cliënten met een lichaamsgrootte gelijk aan of kleiner dan een gemiddeld persoon van 12 jaar.

Voldoet aan IEC 60601-2-52

## Framekleur

Wit



Let op: kleuren kunnen enigszins afwijken van de hierboven weergegeven kleur.

De **Soft Tilt** wordt geproduceerd door GDV Technology in opdracht van Invacare.

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57  
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58  
[nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com)  
[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

Invacare B.V.  
Galvanistraat 14-3  
6716 AE Ede  
Nederland

