


Flexibiliteit en comfort

Het *Invacare Dacapo* Matrassen assortiment heeft een ruime keus aan producten van standaard tot preventieve matrassen. Er zijn verschillende producten, waaronder matrassen met een hoge veerkracht, milieuvriendelijk materiaal of visco elastisch schuim met een hoge dichtheid. De **Dacapo** Matrassen zijn speciaal geselecteerd voor de Invacare bedden en zijn ontwikkeld om een optimaal ligcomfort met goede drukverdeling van het lichaam te verkrijgen, waarbij hygiëne en gebruiksvriendelijkheid voorop staan.

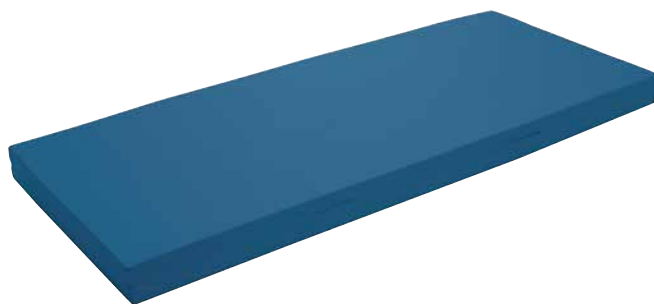

Invacare Dacapo Basic

De *Invacare Dacapo Basic* matras is een basiszorgmatras, voorzien van een incontinentiebestendige hoes, dat voldoet volledig aan de eisen die worden gesteld aan comfort, hygiëne en duurzaamheid. De hoge dichtheid van het veerkrachtige schuim zorgt voor een goede ondersteuning.



Rits
aan twee kanten.



Goed hanteerbaar



120 mm schuim
met hoge veerkracht, 38 kg/m³.



Invacare Dacapo Heavy User

De *Invacare Dacapo Heavy User* matras is speciaal vervaardigd voor de wat zwaardere gebruiker en zorgt voor de juiste ondersteuning. Dit bijzondere concept combineert drie veerkrachtige soorten schuim. Dit matras kan perfect worden gebruikt in combinatie met de Invacare bedden.



Brandveiligheid voldoet aan de Europese standaard EN597-1 en de Europese standaard EN597-2



Discrete rits aan 3 zijden van het matras met flap



Goed hanteerbaar




Heavy User
max. gebruikersgewicht 200 kg:
Bovenlaag (50 mm)
visco-elastisch schuim 50 kg/m³
Tussenlaag (50 mm)
schuim met hoge veerkracht 38 kg/m³
Onderlaag (50 mm)
schuim met hoge veerkracht 50 kg/m³

Dacapo Heavy User hoes


- 100% waterdicht
- Polyester coating met polyurethaan
- Ademend
- Twee-weg rekbaar
- Wasbaar op 95 graden

Heavy User
max. gebruikersgewicht 350 kg:
Bovenlaag (50 mm)
visco-elastisch schuim 50 kg/m³
Tussenlaag (50 mm)
schuim met hoge veerkracht 38 kg/m³
Onderlaag (50 mm)
schuim met hoge veerkracht 50 kg/m³

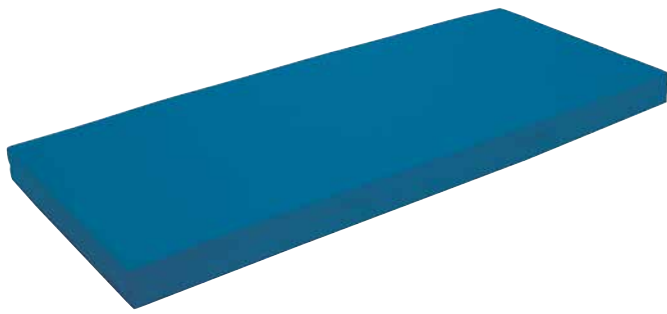

Invacare Dacapo Square

De *Invacare Dacapo Square* matras is vervaardigd uit twee soorten schuim, waarvan de bovenlaag bestaat uit milieuvriendelijk materiaal. Door de speciale uitsnijding ontstaat er een goede drukverdeling. De structuur zorgt voor optimaal „ademen“ van de matras. Door de specifieke eigenschappen van deze **Dacapo Square** wordt elke ronding van het lichaam apart ondersteund.

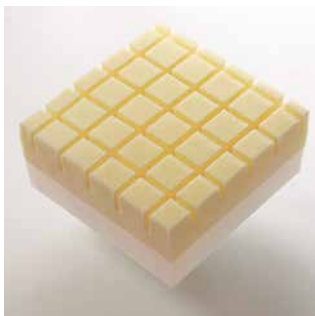

Bovenlaag (80 mm)
Organisch schuim met hoge veerkracht, 50 kg/m³.

Onderlaag (60 mm)
Schuim met hoge veerkracht, 38 kg/m³.



Goed hanteerbaar



Rits
aan twee kanten.



Invacare Dacapo Combi

De *Invacare Dacapo Combi* matras is een combinatie matras die zorgt voor een uitstekende verdeling van de lichaamsdruk. De toplaag is van zelf-regulerend en warmte gevoelig traagschuim dat reageert op lichaamstemperatuur en beweging. De **Dacapo Combi** matras geeft ontspanning aan het lichaam en vormt zich naar de contouren van het lichaam. De open celstructuur zorgt voor een zeer goede ventilatie bij lichaamsvocht en warmte. De onderlaag maakt de matras zeer robuust en sterk.



Bovenlaag (70 mm)
Visco elastisch schuim met hoge veerkracht, 50 kg/m³.


Onderlaag (70 mm)
Schuim met hoge veerkracht, 38 kg/m³.



Goed hanteerbaar



Rits
aan twee kanten.

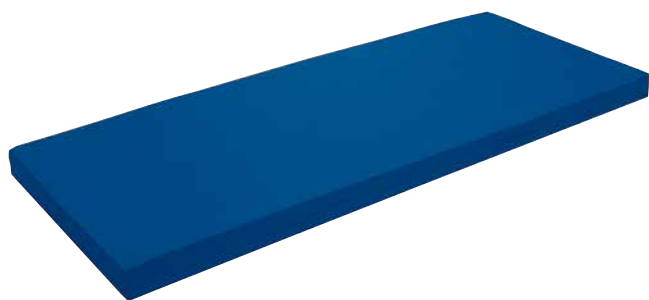


Invacare **Dacapo Top**

De *Invacare* **Dacapo Top** matras is een kwaliteits opleg matras met een drukverlagende eigenschap. Het traagschuim is van zelf-regulerend en warmte gevoelig materiaal dat reageert op lichaamstemperatuur en beweging. De open celstructuur van de matras geeft een goede ventilatie.






Rits
aan twee kanten.

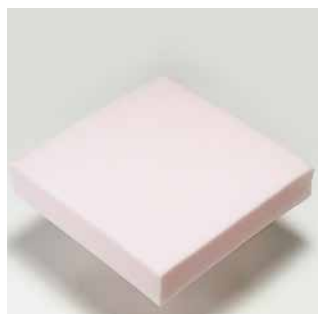

60 mm visco elastisch schuim
met hoge veerkracht, 50 kg/m³.

Technische gegevens

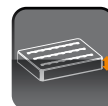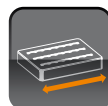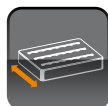

Aanbevolen max. gebruikers gewicht:

Dacapo Basic	8 kg	110 kg	800, 830, 850, 880 mm	2000 mm	120 mm
Dacapo Heavy User	9 - 15 kg	200 kg of 350 kg	800, 850, 900, 1050, 1200 mm	2000 mm	150 mm
Dacapo Square	10 kg	110 kg	830, 880 mm	2000 mm	140 mm
Dacapo Combi	10 kg	110 kg	830, 880 mm	2000 mm	140 mm
Dacapo Top	6 kg	110 kg	850, 900 mm	2000 mm	60 mm

Invacare **Dacapo** Matrassen voldoet aan de Europese Standaard EN597-1 en EN597-2 vlamvertraging.
Invacare **Dacapo** Standard voldoet aan de Europese Standaard EN597-1

Bekleding



Donkerblauw
Dacapo Basic



Turquoise
Dacapo Heavy User



Petroleum
Dacapo Square



Donker blauw
Dacapo Combi



Donker blauw
Dacapo Top

Invacare **Dacapo** incontinentiebestendige tijk / matrashoes

- 100 % vloeistof-dicht
- Gecoat polyester met PUR (polyurethaan)
- Ademend materiaal
- Elastisch in lengte en breedte richting
- Wasbaar tot 95 graden